

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ  
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ:  
ХИМИК-  
ЭКСПЕРИМЕНТАТОР?



ВРАЧ КЛИНИКО-  
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ  
ЛАБОРАТОРИИ?



# ЧАСТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ vs. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ


Централизация – в первую очередь, экономическая категория, а во-вторых, организационная

Для того, чтобы повысить конкурентоспособность, государственным лабораториям необходимо провести реорганизацию лабораторной службы таким образом, чтобы выполнить одновременно несколько, на первый взгляд, противоречащих друг другу задач:


- Снижение затрат
- Расширение спектра исследований
- Повышение качества услуг
- Сокращение времени получения результата



Существует 2 составляющие качественных анализов

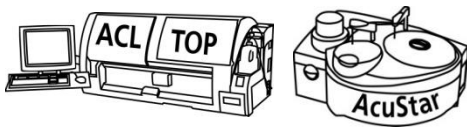


Аналитическая платформа.  
Точность  
Калибровочные кривые

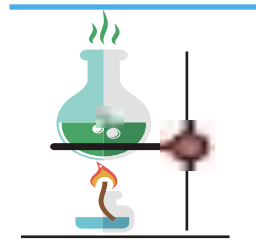

Реактивы.  
Оправдано ли использование дешевых и  
низкокачественных реактивов в КДЛ?

- Стабильность реагента на борту, соответствие заявленной в паспорте
- Воспроизводимость ключевых характеристик от лота к лоту
- Чувствительность и специфичность
- Наличие одобрения FDA
- Форма выпуска, исключая влияние человеческого фактора

23 ГКБ г. Москва  
врач КДЛ, Елена Кочергина

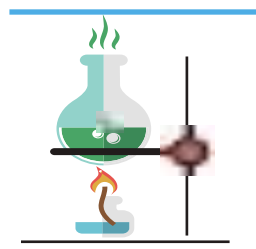

## Протокол исследования:

- 14 обычных проб
- 2 реагентные системы
- свежие реагенты

- АЧТВ Instrumentation Laboratory:

Жидкая форма, готов к использованию;

Активатор – силикатные частицы, синтетические фосфолипиды;

Стабильность 14 дней при 2–8°C, 24 часа при 18–25°C;

Норма: 24–34 с


- АЧТВ Ренам:

Лиофилизат, время приготовления 30 минут;

Активатор – эллаговая кислота, соевые фосфолипиды;


Стабильность 14 дней при 2–8°C, 24 часа при 18–22°C

Норма: 23 – 33 с

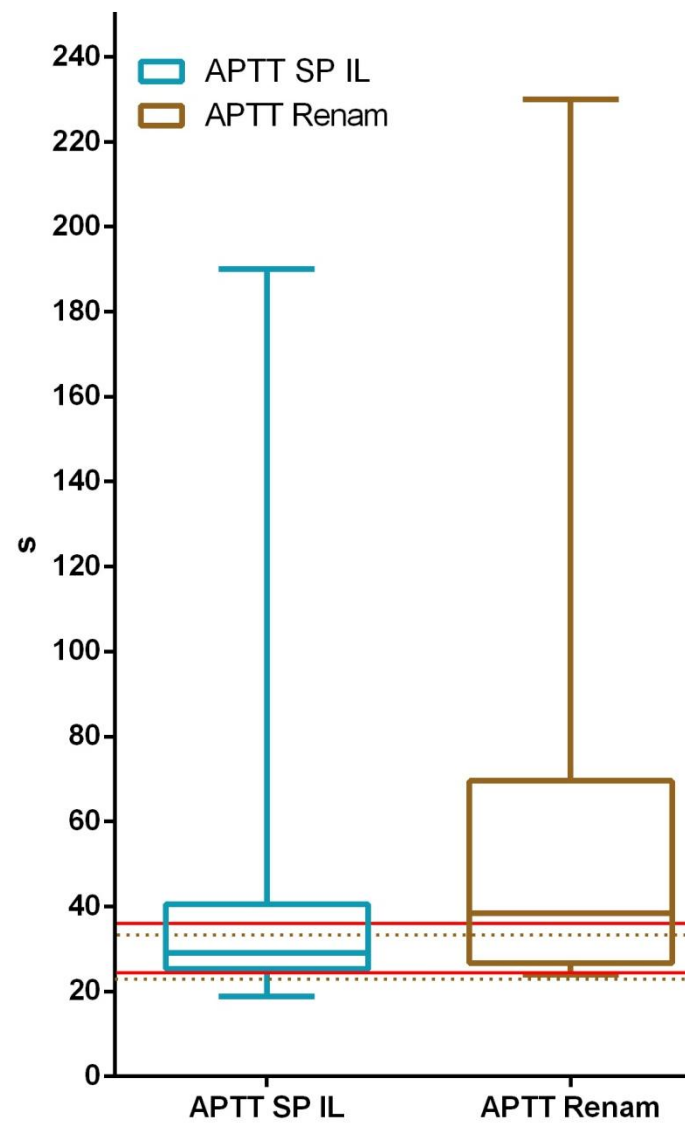

23 ГКБ г. Москва

врач КДЛ, Елена Кочергина

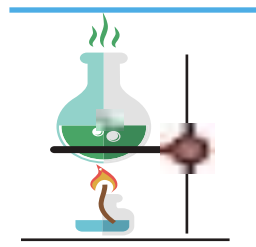

## Протокол исследования:


- 14 обычных проб
- 2 реагентные системы
- свежие реагенты

### • FIB C Instrumentation Laboratory:

Лиофилизат, время приготовления 30 минут;  
 Стабильность 5 дней при 2-8°C, 2 дня при 18-25°C;  
 Норма: 2,2 – 5,0 г/мл

### • FIB C Ренам:

Лиофилизат, время приготовления 30 минут;  
 Активатор – эллаговая кислота, соевые фосфолипиды;  
 Стабильность 5 дней при 2-8°C, 2 дня при 18-22°C  
 Норма: 1.8 – 4,0 г/мл

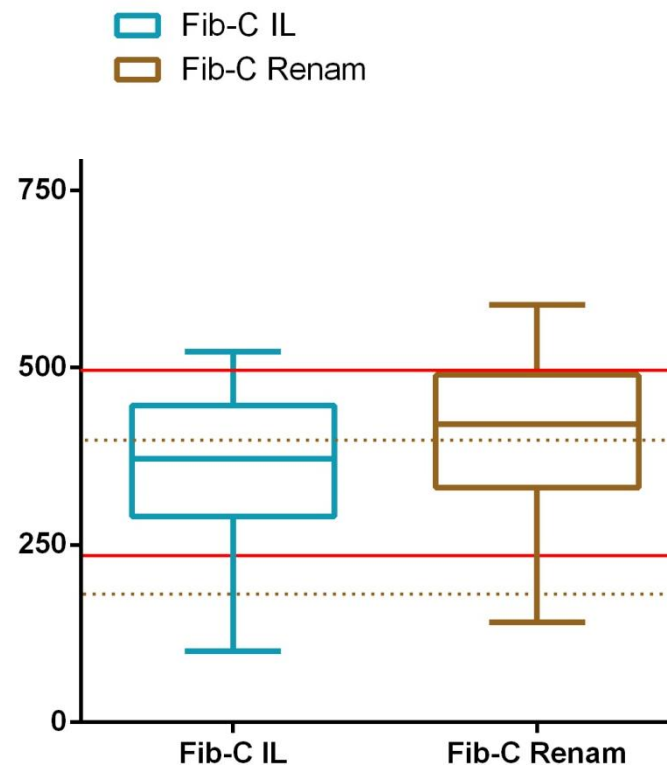

ЦИТАТА ДНЯ

“It’s nice to know that  
computer understands  
the problem, but I like  
to understand it too!”



Eugene Wigner – венгерский физик и математик  
Лауреат нобелевской премии по физике 1963

ЦИТАТА ДНЯ



“Замечательно знать,  
что мой анализатор  
понимает проблему,  
но мне бы так же  
хотелось ее понимать!”

TOP FAN сLAB



30 сентября 2014

Научно –практический семинар  
с международным участием TFC – 2014  
Москва, Симоновский вал, 2  
конференц зал «СИМОНОВСКИЙ»

INSTRUMENTATION  
LABORATORY  
GALEN

TOP FAN cLAB

Thank you for your attention!  
Спасибо за внимание!



В программе TFC:

- Factor-parallelism
- Тромбориск
- Мониторинг новых оральных  
аникоагулянтов
- Heparin Induced Trombocitopenia
- Тромбоцитопения
- Coagulation Curves
- Централизация

# TFC TEAM:



KSENIYA PAVLOVA  
Instrumentation Laboratory  
Country Manager



ALEXANDROS FISTOURIS  
Instrumentation Laboratory  
Int. Hemostasis Manager



Assia Andreeva  
Galen  
BU Manager



Svetlana Bozrova  
Galen  
Application Spec.



Yana Sokolova  
Galen  
Application Spec.



Katya Malofeeva  
Inst. Lab.  
Product Manager



Irina Palgova  
Galen  
Product Manager



Azat Garipov  
Inst. Lab.  
Product Manager



Anna Amosova  
Galen  
Product Manager



Rustam  
Bagautdinov  
Galen  
Service Engineer

